

Kasutusjuhend Action



SEADISTAMINE

Rollaatori "lahti võtmine"

Avage turvalukk ja tõmmake käepidemed lahti (vt joonis 1). Vajutage istme torudele, kuni kuulete väikest klõpsatust täielikult kasutus asendis (vt joonis 2). Enne rulaatori kasutamist veenduge, et voltimismehhanism on oma kohale kinnitunud.



Rolli kõrguse reguleerimine


Tõstke lukusti üles ja tõstke või langetage käepide õigele kõrgusele.

Vajutage lukusti alla, käepide lukustatakse nüüd õigele kõrgusele. (Vt joonis 3)



Koti paigaldamine / eemaldamine

Kotirihma kotile panemiseks asetage konks istmevarda esiotsa väljapoole (vt joonised 4 ja 5). Kui see on kinnitatud, kinnitage see takjapaeltega (joonis 5a).

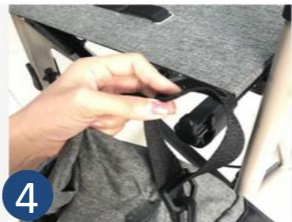

Braking / stopping

Rullaatori liikumise ajal pidurite rakendamiseks tõmmake mõlemat pidurihooba ülespoole (joonis 6). Pidurdage alati aeglaselt ja ühtlaselt. Lükake kaks pidurihooba alla, et need lukustuda (joonis 7). Pidurite vabastamiseks tõmmake pidurihoobasid üles.

Pange tähele: pidureid mõjutavad rataste hõõrdumine ja kulumine. Kontrollige regulaarselt pidureid.



Piduri reguleerimine

Piduri reguleerimiseks tõmmake piduritross üles (joonis 8), reguleerige pidurit, keerates mutrit üles või alla (vt joonis 9)



Rollaatoril istudes

Asetage rullaator tasasele, kindlale pinnale.
Sulgege pidurid (parkimisasend).
Rullaator peab seisma täiesti kindlalt.
Istuge sirge seljaga ja ärge kallutage tagasi.
(Joonis 10).



-ETTEVAATUST-ÄRGE sõitke RULAATORIGA ISTUDES.

Rullaatori "voltimine" ja hoiustamine

Selle voltimiseks tõmmake rullaatori istme käepidemest ülespoole, nagu näidatud. (Joonis 11). Rullaatorit saab nüüd täielikult kokku voltida ja turvalukuga lukustada, nagu näidatud (joonis 12).



Väikesed tõkked jalaga reguleeritud

Kui teil on vaja rullaatoriga ületada väiksemaid takistusi, näiteks kõnniteede randid ja lävepakud, on soovitatav kasutada tagumise ratta juures olevat hooba (joonis 13).

Vajutage lihtsalt hooba ja kerge liigutusega tõmmake tagasi käepidemeid tõstab teie rullaatori esirattaid, et hõlbustada takistuste ületamist.



Kargu tugialus

Kargukinnitus koosneb kahest osast, konks üleval ja kokkupandav alus all ning seda kasutatakse kasutaja poolt jalutuskepi või kargu paigutamiseks ja kõndimise ajal kandmiseks.



Pudelihoidja

Rullaatoril on tassi / pudelihoidja, mis sobib ideaalselt vedelikega täidetud tassi või pudeli hoidmiseks.



VASTAVUSEDEKLARATSIOON

Kinnitame, et ülaltoodud toode vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42 / EMÜ ja Kreeka riiklike õigusaktide sätetele ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ.130648. ΦΕΚ 2198Β / 02.10.2009

Iga käesolevas avalduses esitatud toode vastab selle tehnilises dokumentatsioonis sisalduvatele tehnilistele kirjeldustele. Kui pakutakse asjakohast hooldust ja toodet kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile, on toode ohutu ja tõhus ega ohusta toote ohutust. patsient, kasutaja ja / või kolmandad isikud.

See deklaratsioon väljastatakse pädeva asutuse meditsiiniseadmete tootjaregistris (EOF) registreerimistunnistuse alusel. Toode kuulub I klassi, klassifitseerimisreegel 1 ja vastab meditsiiniseadmete direktiivile: 93/42 / EMÜ

TEHNILISED ANDMED

Maksimaalne reguleeritav käetoe kõrgus	105 cm
Minimaalne reguleeritav käetoe kõrgus	88 cm
Rulaatori pikkus	62,5 cm
Rulaatori laius (kasutusasendis)	61 cm
Ratta ratta laius (kokkupandud)	23 cm
Istme kõrgus maapinnast	60 cm
Esirattad	Pehme EVA 20 cm läbimõõduga materjal, pööratav 360°
Tagumised rattad	Pehme EVA materjali läbimõõt 18 cm
Raami materjal	Aluminum
Maksimaalne patsiendi kaal	136 Kg
Koti maksimaalne kaal	5 Kg
Toote kaal	6,5 Kg

Tähtis (!)

ETTEVAATUSABINÕUD

- Kasutage ainult kõndimisabina!
- Kasutage ainult kõval pinnal, kõnniteel ja siseruumides.
- Maksimaalne kasutaja kaal: 136 kg.
- Kontrollige regulaarselt rullaatori kruvisid ja kinnitusvahendeid ning vajadusel pingutage.
- Kasutage kotti ainult väikeste esemete transportimiseks ja ärge koormake seda üle. Maksimaalne koormus: 5 kg.
- Ärge jätke toodet pikka aega temperatuurile üle 40 ° C, kuna see võib toodet kahjustada ja kasutajat vigastada.
- Veenduge, et rulaator on täielikult avatud ja istme all olev lukusti on alumisse asendisse lukustatud.
- Veenduge, et mõlemad käepidemed on lukustatud ja võrdse kõrgusega.
- Enne rullaatori kasutamist kontrollige pidurihooba. Pidurite vabastamisel peavad rattad vabalt pöörlema.
- Enne istumist lukustage alati pidurihoob ja ärge kasutage istet, kui toode on kallutatud või ebatasasel pinnasel.
- Asendage rehvid või pidurid, kui need on tugevalt kulunud või kahjustatud.
- ÄRGE liigutage istudes RULAATORIT. See on ainult kõndimisabivahend ja seda ei tohiks kasutada transpordivahendina.

PUHASTAMINE JA desinfitseerimine

Puhastamist vajavatel pindadel kasutage ainult niisket lappi ja pehmet seepi. Seejärel kuivatage enne toote kasutamist põhjalikult. Kui peate toote desinfitseerima, kasutage tavalist pehmet desinfitseerimisvahendit. Ärge kunagi kasutage happeid, leeliseid ega lahusteid, nagu atsetoon või lahustid.

Seadme rikke või rikke korral võtke ühendust volitatud ja koolitatud edasimüüjaga.



Keskkonnakaitse

Kui leiate, et teie seade vajab väljavahetamist (see pole teile enam kasulik), kaaluge keskkonna kaitsmist:

Ärge visake seadet teiste olmejäätmete hulka .

GARANTII

Tootele on tagatud kaheaastane (2) garantii alates toote müügikuupäevast.

Garantii hõlmab tehase defekte ja EI kata kahjustusi, mis tulenevad väärkasutusest, halvast hooldusest, muutmisest, kuritarvitamisest või toote kasutusjuhendi mittejärgimisest. Samuti EI kata kulunud osi, nagu rehvid, pidurid, kangas ja mis võivad kasutamise või aja jooksul kuluda.

Kahjustused või defektid, mis on põhjustatud: loodusõnnetustest, volitamata hooldusest või remondist, tarneprobleemidest (vajaduse korral), vedajatele garantii ei kehti.