

1. klassi meditsiiniseade vastavalt MDR (EL) 2017/745.

See seade on mõeldud kasutamiseks isikutele, kes oskavad lugeda ja mõistavad kasutusjuhendit.

TOOTE KASUTAMINE Tooli padi. Abi
survehaavandite ennetamisel ja ravil.

NÄIDUSTUS P301

- **P302C / POLYAIR® patja võib kasutada, kui:** - 1. Survehaavand (I-IV staadium vastavalt EPUAP-le) on juba olemas. VÕI – 2. risk on suurenenud või väga kõrge vastavalt hindamisskaalale (Braden, Norton, Waterlow, ...). POLYAIR® padi sobib patsientidele, kellel on varem esinenud survehaavad kokkupuutel tuharatega ja/või kellel on kehative või alajäsemete täielik või mittetäielik halvatus ja/või kellel on alajäsemete tundlikkus vähenenud või puudub ja/ või kellel on spastilised luumurrud ja/või kellel on vähenenud eesmine ja/või külgmine stabiilsuse ja/või tasakaaluhäired. vaagna ja/või kellel on vaskulaarne amputatsioon ja/või kes on halvas üldseisundis.

sisse

Seadme valiku peab heaks kiitma tervishoiutöötaja.

KASUTUSTINGIMUSED

Integreeritud POLYMAILLE® / POLYMAILLE® HD-kaitsega seadmeid saab kasutada ühe või mitme patsiendi jaoks. Seda saab taastada vastavalt toote juhistele ning puhastus- ja desinfitseerimisjuhistele.

Esimene samm lamatiste ennetamisel istudes on keha võimalikult sageli tõstmine, et piirata veresoonte kokkusurumist ja võimaldada seeläbi korralikku vereringet.

! HOIATUS! Survehaavandite ennetamiseks ei piisa ainult toest, vaid vajalikud on ka muud ennetusmeetmed, nt. järgmised:

- vahetage sageli asendit (vähemalt iga 2-3 tunni järel); - säilitada nahahügieeni ja vältida naha kuivust; - kui teil on uriinipidamatus, vahetage regulaarselt padjandeid; - jälgida või lasta jälgida naha seisundit igapäevaselt; - tagada, et toitumine oleks piisav ja sobiv; - joo regulaarselt ja piisavalt.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ärge kasutage seadet väljaspool ettenähtud kasutust ja näidustusi. Pöörake erilist tähelepanu võimalikele mõjudele silmapõhjale patsientidel, kes kannatavad konkreetse korpuse või morfoloogia all (raske rasvumine, kahheksia, deformatsioon jne). Ärge kasutage, kui olete polüüretaanis suhtes allergiline. Kui teil on probleeme, võtke ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga.

KÕRVALTOIMED

Soovimatuid kõrvaltoimeid pole. Siiski võivad patsiendil tekkida keelekümblusele iseloomulikud mõjud: võimalik (piiratud) taju- ja liikuvuskahjustus. Suurenenud kuumuse tunne.

SEADME JÕUDLUS Leevendab

maksimaalset survet (P. Max) sukeldamise teel, parandab vereringet ja vähendab survehaavandite riski.

KLIIINILINE KASU

Parandab kudede hapnikuga varustamist kontaktsoonis.

TEAVE TERVISHOIUTÖÖTAJATELE Veenduge , et seade sobib patsiendi

keskkonda. Tagada hoolduse järjepidevus.

PAIGALDAMISJUHEND

! Veenduge, et tootil oleks hea istumisasend, et – Padja sobiks tooliga.

- Eemaldage padi pakendist ja kaitsekotist. Paigaldage vajadusel padjakate ja veenduge, et tõmblukk on suletud.
- Veenduge, et padi ja iste ühtivad.
- Veenduge, et eesmine ja tagumine, ülemine ja alumine asend oleksid õige.

- Vajadusel tagage õige töö, seadistused ja reguleerimine.

- Vaadake juhiseid "Puhastamine ja desinfitseerimine".

! Seadme täieliku tõhususe säilitamiseks kontrollige, kas kaal on väärtuste **A** ja vahel . **A** Minimaalne kaal, mida seade suudab kanda, ilma et see vähendaks selle tõhusust. **B** Maksimaalne kaal, mida seade suudab kanda ilma selle tõhusust vähendamata.

ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEKS - Ärge

kasutage ilma katteta. - Ärge asetage patsiendi ja seadme vahele võõrkehi, välja arvatud riided.

- Soovitame hankida varukatte.

- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada katet. Sageli tähelestatud vigastused: sigaretipõletused, lemmikloomade kriimustused, augud, lõikehaavad skalpellide või teravate esemetega, teravate teradega instrumentide kasutamisest põhjustatud vigastused. - Ärge kasutage varukatteid peale SYSTAM® tarnitud,

tarvikuid või komponente.

- Integreeritud Polymaille® kattega patjade puhul tuleks kate padjalt perioodiliselt eemaldada, et see välja tuulaks, ja katet tuleks masinas pesta.

- Hoida eemal süttimisallikatest.

- Kui märkate toote riknemist (deformatsioon või vahu lekkimine) või põhjamoju, võtke ühendust müüjaga.

- Teatage õele võimalikult kiiresti kõigist ebatavalistest sündmustest, nagu valu, punetus või tundlike kohtade valgeks muutumine.

- Igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ja kohalikule pädevale asutusele.

TEHNILISED ANDMED

Padja materjal: LAXPRENE®.

Välismaterjal: Jersey: jersey (PA). POLYMAILLE® ja POLYMAILLE®HD: polüüretaanikate (PU) trikoo (PA).

EELDATAV EEGAEG Nende

toodete eluiga on 3 aastat, kui neid kasutatakse rangelt vastavalt hooldus- ja hooldusjuhistele. Kasutusiga võib olla pikem, kui toodet hoolikalt hooldatakse, ja seda võib äärmusliku või ebaõige kasutamise korral oluliselt lühendada.


See ei anna nendele toodetele täiendavat garantiid.

GARANTII

Kaks aastat tootmisdefektide vastu alates kuupäevast, mil klient toote ostis. Väiksemad tootmisvead (väikesed rebendid, marmoreering, pinnadefektid jne) ei mõjuta mingil moel toote kvaliteeti ja efektiivsust ega saa olla põhjuseks toote garantiikorras väljavahetamisele. Garantii ei kata padja või selle katte väärkasutust, tavalist kulumist. Defekti korral võtke ühendust tarnijaga ja andke talle toote partii number.



MD P301C / P302C

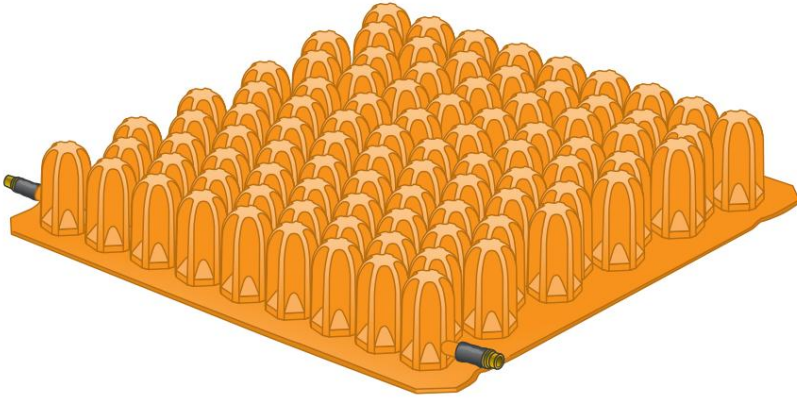

Survehaavandeid ennetavad padjad JUHISED



SYSTEM ABI MEDICAL SAS ZAE - Route de Casseneuil - LE LEDAT 47300 VILLENEUVE SUR LOT
- PRANTSUSMAA Tel. kommerts: 05 53 40 23 50 -
kaubanduslik faks: 05 53 40 50 40 rahvusvaheline telefon + 33 553 40 50 30 - rahvusvaheline faks
+ 33 553 40 58 38 www.systam.com



© SYSTAM®
08/2021
4870DV1



LADUSTAMINE, KÄITLEMINE, TRANSPORT

- Eelistatavalt tasane. Ärge hoidke seda oluliste soojusallikate läheduses.
- Hoida kuivas ja parasvöötmes, kuumuse ja valguse eest kaitstult kaitsekotis.
- Käsitsege patja ettevaatlikult, et vältida katte kahjustamist.
- Transporditakse kandekotis või karbis.
- Kõigi käsitlemise/transpordi puhul järgige neid juhiseid.

OHUTUS JA KESKKOND

Ärge põletage ega visake prügilasse. Austage oma riigis kehtivaid seadusi. taaskasutuskanalid. Mitte alla neelata. 0% CFC vaht. Vastab tulestandarditele EN 597-1 ja 597-2.

SÜMBOLID	
	Tootja + valmistamise kuupäev
	CE-märgis
	Meditisiiniseade
	Toote number
	Partii number
	Vaata kasutusjuhiseid
	Habras, käsitseda ettevaatlikult
	Hoida eemal niiskusest.
	Hoida päikesevalguse eest.
	Kasutaja kaal
	Asenduskaane osa number

joonisel fig. 2								REF	
								POLYMAILLE®	JERSEY PIIRATUD SAADAVUS
P301C3636		36 cm / 14"	36 cm / 14"	6 cm / 2,4"	0,9 kg / 2,0 lbs	20 kg / 44 naela	60 kg / 130 naela	P501PA3636W	P501PA3636S
P301C4040		40 cm / 16"	40 cm / 16"	6 cm / 2,4"	1,0 kg / 2,2 lbs	30 kg / 66 naela	80 kg / 175 naela	P501PA4040W	P501PA4040S
P301C4043		40 cm / 16"	43 cm / 17"	6 cm / 2,4"	1,1 kg / 2,4 lbs	30 kg / 66 naela	90 kg / 200 naela	P501PA4043W	P501PA4043S
P301C4046		40 cm / 16"	46 cm / 18"	6 cm / 2,4"	1,1 kg / 2,5 naela	30 kg / 66 naela	110 kg / 242 naela	P501PA4046W	P501PA4046S
P301C4343		43 cm / 17"	43 cm / 17"	6 cm / 2,4"	1,2 kg / 2,7 lbs	30 kg / 66 naela	110 kg / 242 naela	P501PA4343W	P501PA4343S
P301C4346		43 cm / 17"	46 cm / 18"	6 cm / 2,4"	1,2 kg / 2,7 lbs	30 kg / 66 naela	120 kg / 264 naela	P501PA4346W	P501PA4346S
P301C4640		46 cm / 18"	40 cm / 16"	6 cm / 2,4"	1,2 kg / 2,7 naela	40 kg / 88 naela	120 kg / 264 naela	P501PA4640W	P501PA4640S
P301C4646		46 cm / 18"	46 cm / 18"	6 cm / 2,4"	1,3 kg / 2,9 lbs	40 kg / 88 naela	140 kg / 308 naela	P501PA4646W	P501PA4646S
P301C5146		51 cm / 20"	46 cm / 18"	6 cm / 2,4"	1,5 kg / 3,3 naela	40 kg / 88 naela	160 kg / 352 naela	P501PA5146W	P501PA5146S
P301C5150		51 cm / 20"	50 cm / 20"	6 cm / 2,4"	1,6 kg / 3,5 naela	40 kg / 88 naela	180 kg / 396 naela	P501PA5150W	P501PA5150S
P301C5646		56 cm / 22"	46 cm / 18"	6 cm / 2,4"	1,6 kg / 3,5 naela	60 kg / 132 naela	230 kg / 507 naela	P501PA5646W	P501PA5646S
P301C6150		61 cm / 24"	50 cm / 20"	6 cm / 2,4"	1,7 kg / 3,8 naela	80 kg / 176 naela	270 kg / 595 naela	P501PA6150W	P501PA6150S
P301CM4040		40 cm / 16"	40 cm / 16"	6 cm / 2,4"	1 kg / 2,2 lbs	30 kg / 66 naela	80 kg / 175 naela	P501PA4040W	P501PA4040S
P301CM4343		43 cm / 17"	43 cm / 17"	6 cm / 2,4"	1,2 kg / 2,7 lbs	30 kg / 66 naela	110 kg / 240 naela	P501PA4343W	P501PA4343S
P301CM4646		46 cm / 18"	46 cm / 18"	6 cm / 2,4"	1,3 kg / 2,9 lbs	40 kg / 88 naela	140 kg / 310 naela	P501PA4646W	P501PA4646S
P302C4040		40 cm / 16"	40 cm / 16"	10 cm / 4"	1,6 kg / 3,5 naela	40 kg / 88 naela	80 kg / 175 naela	P502PA4040W	P502PA4040S
P302C4043		40 cm / 16"	43 cm / 17"	10 cm / 4"	1,7 kg / 3,8 lbs	40 kg / 88 naela	90 kg / 198 naela	P502PA4043W	P502PA4043S
P302C4046		40 cm / 18"	46 cm / 18"	10 cm / 4"	1,7 kg / 3,8 naela	40 kg / 88 naela	120 kg / 264 naela	P502PA4046W	P502PA4046S
P302C4343		43 cm / 17"	43 cm / 17"	10 cm / 4"	1,8 kg / 4 naela	40 kg / 88 naela	110 kg / 242 naela	P502PA4343W	P502PA4343S
P302C4346		43 cm / 17"	46 cm / 18"	10 cm / 4"	1,8 kg / 4 naela	40 kg / 88 naela	120 kg / 264 naela	P502PA4346W	P502PA4346S
P302C4640		46 cm / 18"	40 cm / 16"	10 cm / 4"	1,8 kg / 4 naela	40 kg / 88 naela	120 kg / 265 naela	P502PA4640W	P502PA4640S
P302C4646		46 cm / 18"	46 cm / 18"	10 cm / 4"	2,1 kg / 4,6 naela	40 kg / 88 naela	140 kg / 308 naela	P502PA4646W	P502PA4646S
P302C5146		51 cm / 20"	46 cm / 18"	10 cm / 4"	2,3 kg / 5,1 naela	40 kg / 88 naela	160 kg / 352 naela	P502PA5146W	P502PA5146S
P302C5150		51 cm / 20"	50 cm / 20"	10 cm / 4"	2,5 kg / 5,3 naela	40 kg / 88 naela	180 kg / 396 naela	P502PA5150W	P502PA5150S
P302C5646		56 cm / 22"	46 cm / 18"	10 cm / 4"	2,5 kg / 5,3 naela	60 kg / 132 naela	230 kg / 507 naela	P502PA5646W	P502PA5646S
P302C6150		61 cm / 24"	50 cm / 20"	10 cm / 4"	2,6 kg / 5,5 naela	80 kg / 176 naela	270 kg / 595 naela	P502PA6150W	P502PA6150S
P302CM4040		40 cm / 16"	40 cm / 16"	10 cm / 4"	1,6 kg / 3,5 naela	40 kg / 88 naela	80 kg / 175 naela	P502PA4040W	P502PA4040S
P302CM4343		43 cm / 17"	43 cm / 17"	10 cm / 4"	1,8 kg / 4,0 naela	40 kg / 88 naela	110 kg / 240 naela	P502PA4343W	P502PA4343S
P302CM4646		46 cm / 18"	46 cm / 18"	10 cm / 4"	2,1 kg / 4,6 naela	40 kg / 88 naela	140 kg / 310 naela	P502PA4646W	P502PA4646S



HOIATUS!

