


TÄHTIS


MIKS TÄITDA RÕHUMÕÕTERIGA?

Halvasti reguleeritud inflatsioon vähendab õhkpatjade tõhusust. Ületäitunud või alakaaluline padi võib põhjustada iiveldust. Kuna täitumise kõikumisi igas kambris (mõned mmHg) ei ole võimalik käega katsudes tuvastada, on ainus viis õhupatjade nõuetekohaseks täispuhumiseks kasutada täitmistööriistu, näiteks manomeetrit.

Ainult manomeetril saab arvesse võtta patsiendi kaalu ja kontaktipinda padjaga. See meetod, mis näitab pidevaid tulemusi, tagab tõhusa ennetamise

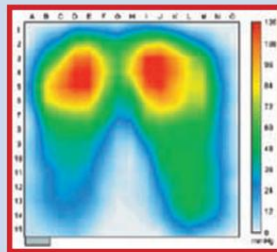

Padi täideti käsitsi meetodil. Punased alad viitavad kõrgele survele istmikul, mis põhjustab suurt survehaavade ohtu.

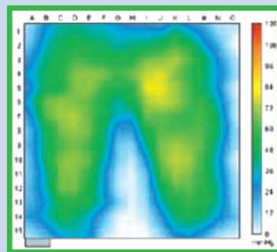

Punased alad viitavad kõrgele survele istmikul, mis põhjustab suurt survehaavade ohtu.

Hästi jaotatud tugi vähendab survet naha vahel riskipiirkondades. Tõhus ennetamine.

MUU TEAVE RÕHUMÕÕTURI ÜLDKASUTAMISE KOHTA:

Manomeetri puhul on tegemist täppisinstrumentidega: peate vältima selle pöörutamist ja jõhkrat käsitlemist. Ärge vajutage täitekorri, kui voolik on muljunud või murdunud, vastasel juhul kahjustate seda.

- Kui patareid on seadme normaalseks tööks liiga tühjaks saanud, vilguvad märgutuled ja seejärel kustuvad, mille järel lülitub välja manomeeter. Sel juhul peate vahetama patareid (2 patareid: 1,5 V LR03 - AAA).
- Manomeetri lülitub automaatselt välja pärast seda, kui see on olnud 2 minutit kasutamata.



SYSTAM®

CE

REF P624A



OLE

Täitmisjuhised - manomeeter Manomeeter

KASUTUSJUHE 1.

klassi meditsiiniseadme tarvik vastavalt MDR (EL) 2017/745.

SYSTAM®




SYSTEM ABI MEDICAL SAS ZAE - Route de Casseneuil - LE LEDAT 47300 VILLENEUVE SUR LOT - PRANTSUSMAA Tel. kommerts: 05 53 40 23 50 - kaubanduslik faks: 05 53 40 50 40 rahvusvaheline telefon + 33 553 40 50 30 - rahvusvaheline faks + 33 553 40 58 38 www.systam.com

G MED
NF EN ISO 13485

© SYSTAM®
08/2021
4871DV1

1 RÕHUVÄÄRTUSTE MÄÄRAMINE

PILT 1

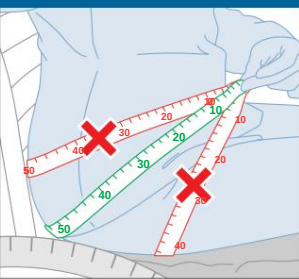

1 Mõõtkes istudes puusade ümbermõõtu (tollides või cm-des), nagu on näidatud **joonisel 1**.


2 Võrrele **joonisel 2** kujutatud survetabelit oma puusade ümbermõõtu (tollides või cm) oma kaaluga.

Näide (pilt 2): kaal: 209 naela / 95 kg; Puusaümbermõõt: 50 tolli / 125 cm Täiteväärtus on 3 (vastab manomeetri näidikule 3).

MÄRKUS. Kui teie täitetas on kahe tsooni vahel, **valige kahest kõrgem.**

POLYAIR® padi on saadaval mitmes erinevas suuruses (soovituste tabel) **Joonis 3**.


Punkte täidetakse mälu huvides

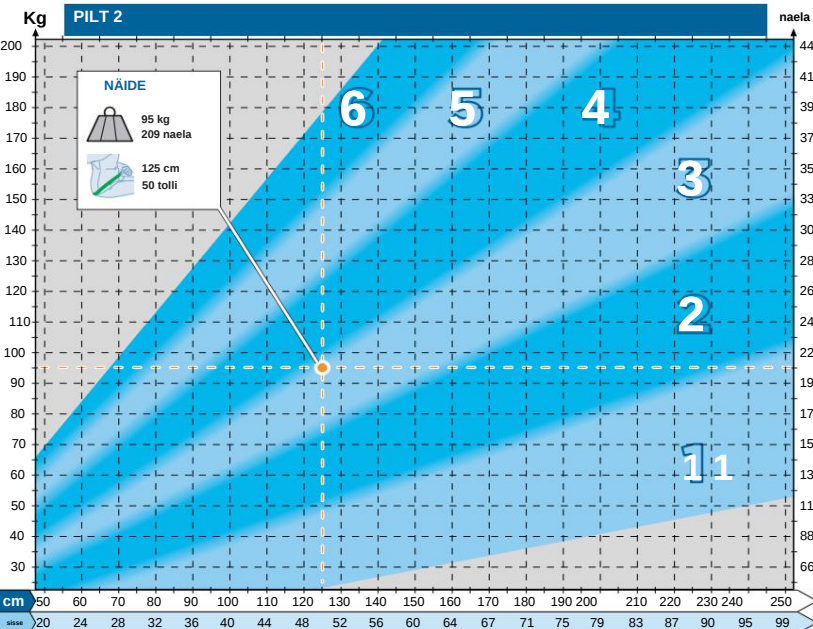

JOONIS 3		Padja suurus										
Puusa laius		36x36 cm 14 x 14"	40 x 40 cm 16 x 16"	40 x 43 cm 16 x 17"	40 x 46 cm 16 x 18"	43x43 cm 17 x 17"	46x40 cm 18 x 16"	46x46 cm 18 x 18"	51x46 cm 20 x 18"	51 x 50 cm 20 x 20"	56x46 cm 22 x 18"	61 x 50 cm 24 x 20"
50 > 75 cm 20" kuni 30"	ÿ											
75 > 95 cm 30 tollini kuni 38 tolli		ÿ	ÿ	ÿ	ÿ							
95 > 115 cm 38 tollini kuni 46 tolli			ÿ	ÿ	ÿ	ÿ						
115 > 135 cm 46 tollini kuni 54 tolli												
135 > + 54" ja +									ÿ	ÿ	ÿ	ÿ

2 EELTÄITMINE JA TÄITMINE

JOONIS 4

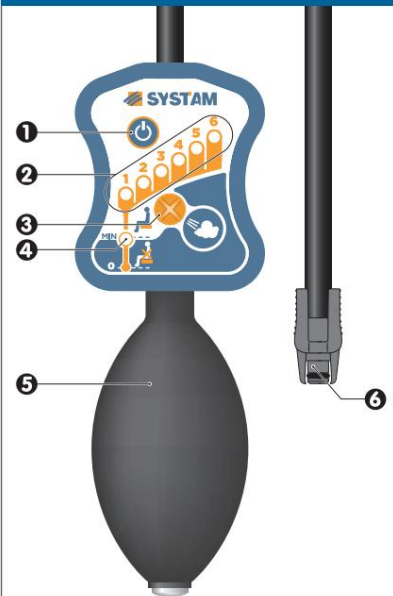

PUMP/ RÕHUMÕIDUR – MANOMEETER

- 1 Sisse/välja nupp
- 2 Täitetaseme indikaatorid
- 3 Tühjenda nupp
- 4 Eeltäitmise märgutuli
- 5 Täitepall
- 6 POLYAIR® ühendusventiili

Allpool olevad täitmisjuhised on esitatud üksikasjalikult 2-kambriliste õhkpatjade kohta.
Ühekambriliste õhkpatjade puhul on pumpamine sama, mis 2-kambriliste patjade.

1 - EELTÄITMINE

Miks kasutada eeltäitmist?

Eeltäitmise on padja reguleerimise oluline samm.

Täitmiselne faas võimaldab padja mõlema lahtri rõhutasemeid paremini tasakaalustada, mis muudab hilisema reguleerimise lihtsamaks.

Eeltäitmise protseduur Joonis 5.

Teha ilma, et patsient istuks padjal.

Lülitage manomeetri sisse, vajutades sisse/välja nuppu 1 **Joonis 4**. Eeltäitmise märgutuli 4 **Joonis 4** vilgub

Ühendage rõhumõõtur kummagi ventiiliga ja täitke iga sektsioon üksikhaaval, kuni täitmistuli süttib (täitmistuli 4, **joonis 4**). Kui see väärtus on ületatud, vähendage rõhku, vajutades tühjendusnuppu 3 (**joonis 4**).

2 - PATSIENDI ASEND (täitmisaaside ajal)

Õige rõhu saavutamiseks järgige alltoodud juhiseid: A Ratastooli seljatugi on püsti.

B Käed ei tohi toetuda käetugedele. **Joonis 6**.

C Jalad asetatakse jalatugedele, mis asetsevad nii, et jalad on täisnurga all (**joonis 6**).

3 - RÕHU REGULEERIMINE JOON. 7 A Asetage


patsient eelnevalt täispuhutud padjale.

B Ühendage manomeeter ühega kahest padja ventiilist ja veenduge, et klapi ühendus on õige. Lülitage manomeeter uuesti sisse, kui see on välja lülitatud.


JOONIS 5



JOONIS 6

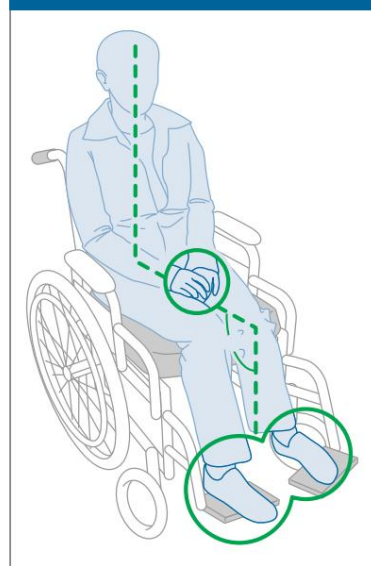

JOONIS 7

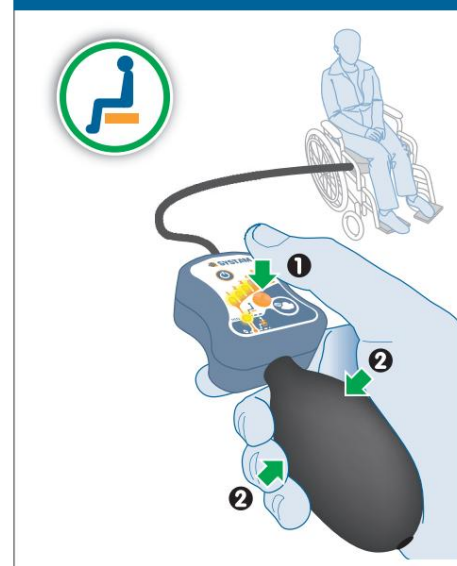

C Kontrollige kambri rõhku ja reguleerige seda, et saada eelnevalt määratud täiteväärtus.

Selleks on kaks 2 võimalikku juhtumit: C-1 Manomeetri näit on suurem kui sihttäitmise väärtus või kõik märgutuled vilguvad ja kustuvad (näitab, et rõhu tase on mõõtmiseks liiga kõrge); sel juhul tühjendage padi järk-järgult, kasutades tühjendusnuppu 3, **joonis 4**, ja ärge unustage selle protsessi jooksul mitu korda püsti tõusta, et õhk sektsioonide ringleks.

C-2 Manomeetri näit on väiksem kui määratud täiteväärtus; Sel juhul täitke padi järk-järgult täispuhumisnupu 5 abil.

Joonis 4, unustamata, et patsient tõuseb selle protsessi käigus mitu korda püsti, et õhk saaks palatis ringelda.

Sama protseduuri järgitakse ka teises osakonnas. Manomeetri väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all sisse-/väljalülitusnuppu 1 **Joonis 4**.

PADJA KONTROLLIMINE JA TÄITMINE.

MÄRKUS. Iga kord, kui patja kontrollite või uuesti täidate, järgige kindlasti punktis 2 kirjeldatud asendit. Nagu enamiku õhuga täidetud toodete puhul, on soovitatav rõhku regulaarselt kontrollida (keskmiselt iga 1-2 nädala järel).

GARANTII

Kaks aastat tootmisdefekte vastu alates kliendi ostukuupäevast. Hooletuse korral võtke ühendust edasimüüjaga ja edastage talle toote seerianumber. Garantii ei kata toe väärkasutust.