



Põgenemistool® VOLT



Escape-Chair® VOLT sisukord




Sisukord	2
Spetsifikatsioonid	3
Escape-Chair® VOLTi avamine	4
Reisija ümberistumine	5
Treppidel reisimine	6-7
Horisontaalne liikumine	8
Paigaldamine	9
Kasutusjuhised	10
Ohutusteave	11

Spetsifikatsioonid	Pögenemistool [®] VOLT
Maksimaalne kandevõime:	254 kg
Maksimaalne trepikalle:	45°
Kaal:	± 37 kg
Kasutusaeg täislaetuna:	3–5 tundi
Mootor:	24 V, 200 W
Korduvate laadimiste ajad (220 V juures):	500
Aku tööiga:	2-3 aastat
Aku garantii:	6 kuud
Lisaaku:	Valikuline
Kiiruste arv:	3
Kasutusvalmis sekunditega:	✓
Jalatugi ja käetoed:	✓
LED-valgustus pimedasse keskkonda:	✓
3 kõrgusega reguleeritava käepidemega:	✓
Leegi- ja kuumakindel iste, peatugi ja tolmuksid:	✓
Kandekäepidemed ees ja taga:	✓
CE-sertifikaadiga:	✓
Tasuta demonstratsioon ja nõustamine:	✓
Tarne sisaldab kasutusjuhendit, isikutunnistust ja seinakonksusid:	✓




Escape-Chair® VOLT Tooli avamine

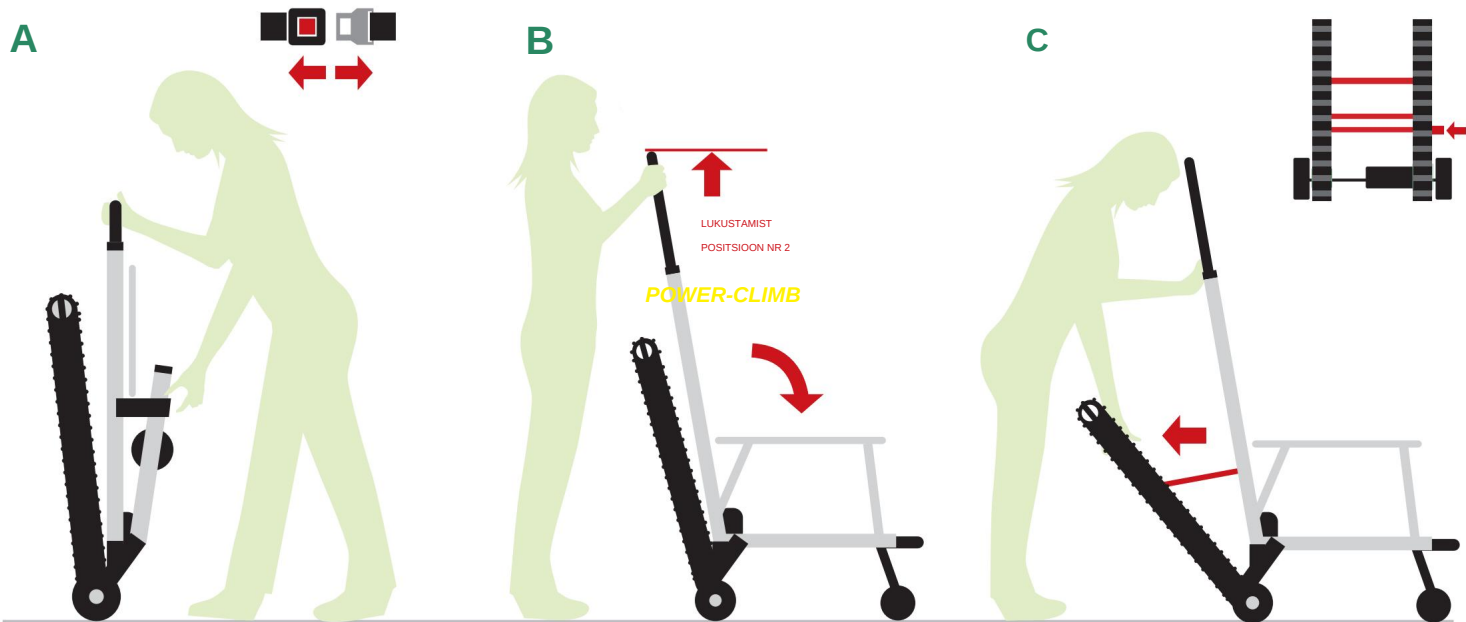


Hoides Escape-Chair® tooli käepidemest, vabastage patsiendi vöö, et iste raamilt

Langetage iste horisontaalasendisse ja tõstke käepide lukustusasendisse nr 1, kuni see oma kohale lukustub.


Rööbaste lahtivoltimiseks keerake Escape-Chair® paremale küljele ja vajutage punast kangi, et rööpad vabastada. Veenduge, et rööpad on täielikult lahtivolditud.

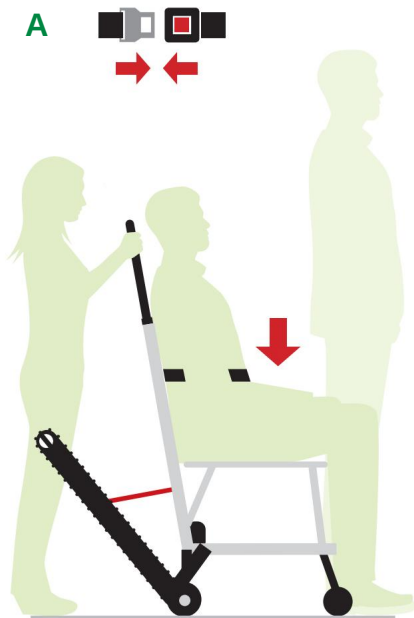

Reisija saab nüüd ümber istuda
Escape-Chair[®]. Kui olete istunud, kinnitage
turvavöö ja sirutage käepidet
lukustusasend nr 2.

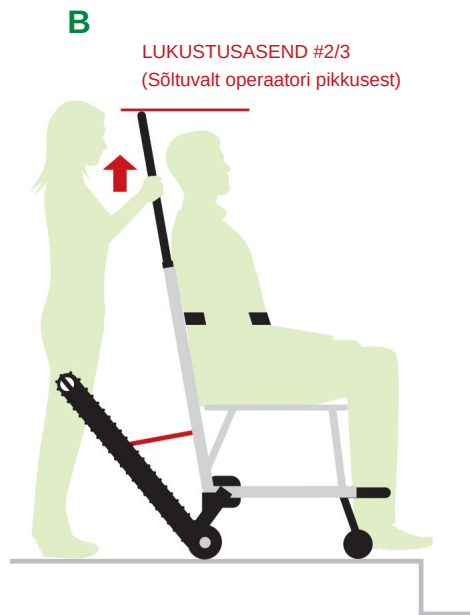


Trepist laskumiseks veeretage tooli
trepi ülaosast ja sirutage käepidet
lukustusasend nr 2.

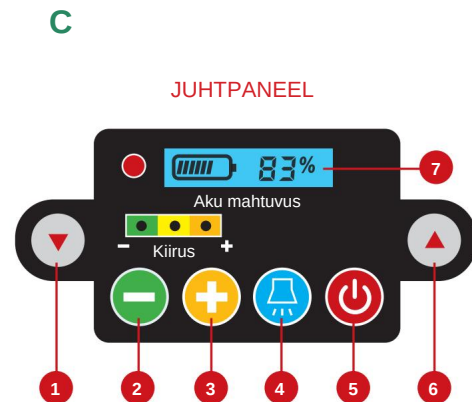


1. TREPPIDEL ALLAMINEK
2. VÄHENDA KIIRUST
3. SUURENDA KIIRUST
4. LED-TEED NÄIDAVA TULI
5. TOITE SISSE LÜLITAMINE
6. TREPPIDEL ÜLESIMINE
7. AKU MAHTUVUSE NÄIDIK


Escape-Chair® VOLT Treppidel liikumine - laskumine

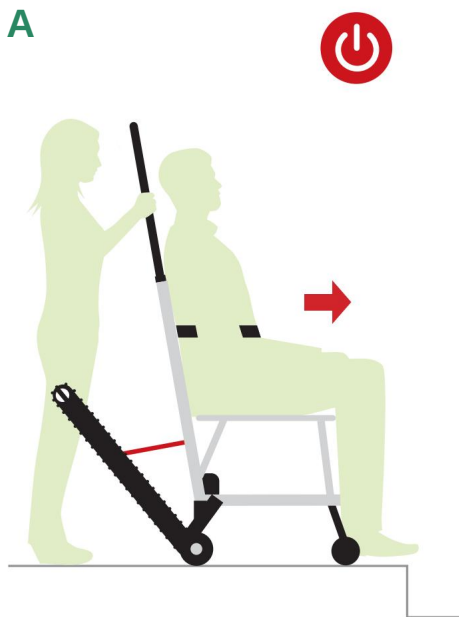


Trepist alla minekuks liigutage tool trepi ülaossa. Vajutage toitenuppu.

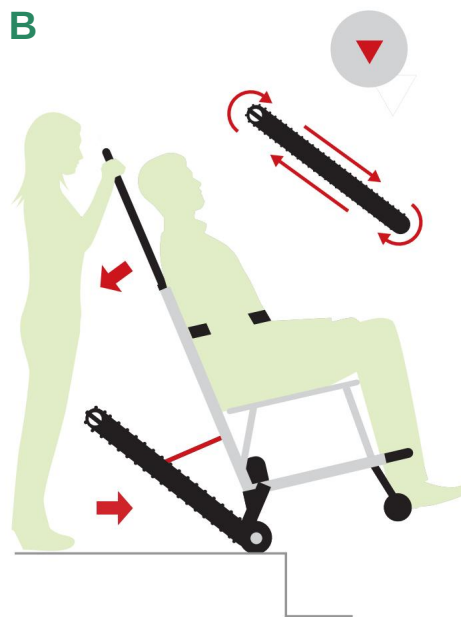

Nüüd kallutage Escape-Chair® tahapoole, nii et rööpad ulatuvad põrandani, vajutage vasakpoolset hõbedast nuppu ja hoidke seda all. Seejärel hakkavad rööpad trepist alla laskuma.

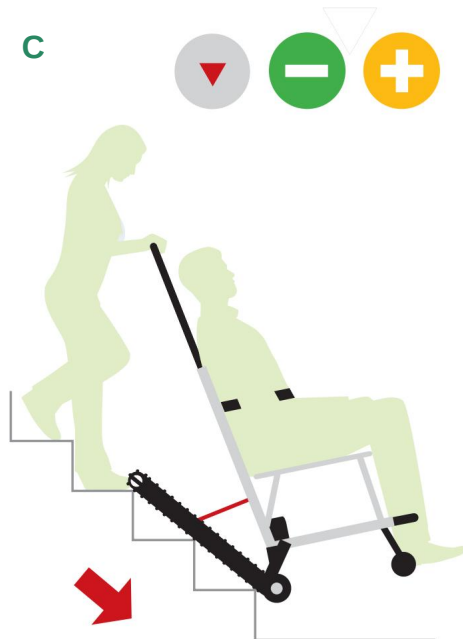

Kiirust on kolm. Valige endale sobiv ja ohutu kiirus, vajutades ekraanil olevaid + ja - nuppe ning hoides allapoole suunatud nuppu all.

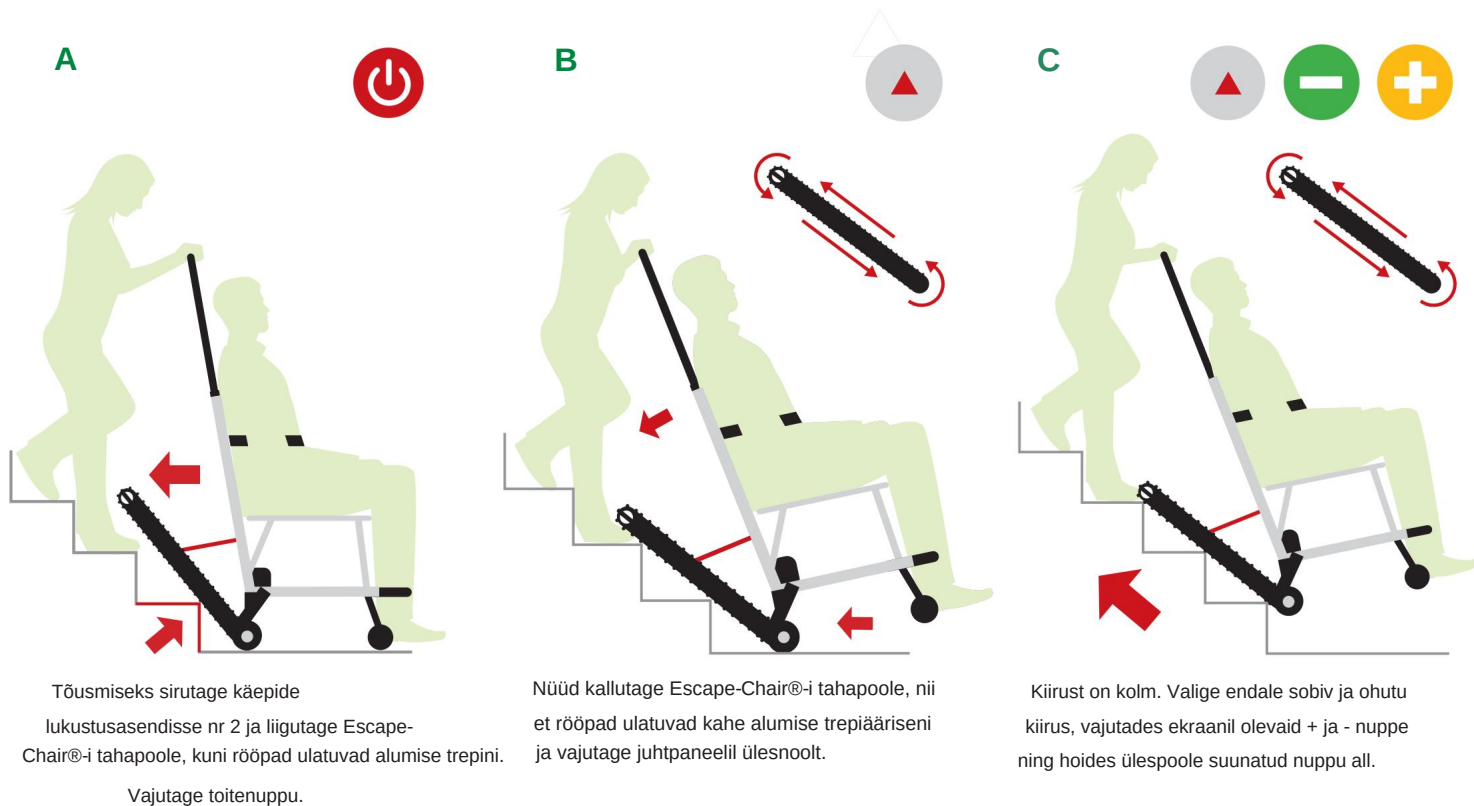

Escape-Chair® VOLT horisontaalne liikumine

A




Rööbaste sulgemiseks lükake punast varrast sissepoole, nii et see haakub täielikult raamiga ja lukustub

See punane varras asub nende vahel

NÜÜD saate toite välja lülitada


B

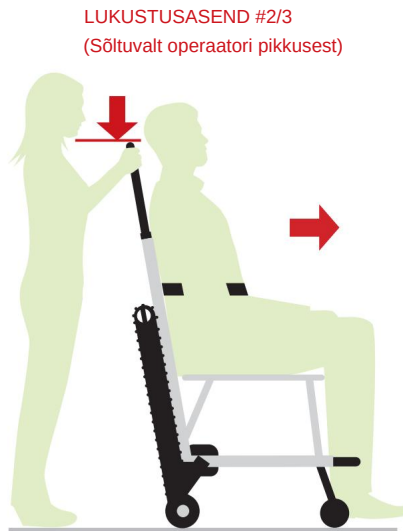

Langetage käepide lukustusasendisse #1

Tools saab nüüd ükskõik millisesse asukohta veeretada.


C

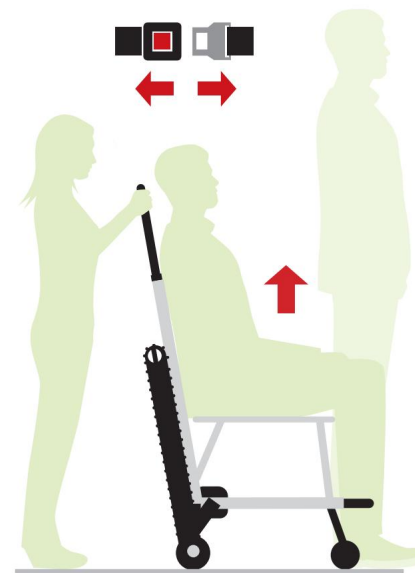

Kui olete jõudnud sihtpunkti, pidurdage tagarattad, vabastage turvavöö ja reisija saab toolilt lahkuda

Kokkupandud mõõtmised			
Kõrgus	Laius	Sügavus	Kaal
1150 mm (45,2 tolli)	500 mm (19,6 tolli)	270 mm (10,6 tolli)	37 kg (86 naela)

Aku sisselülitamine

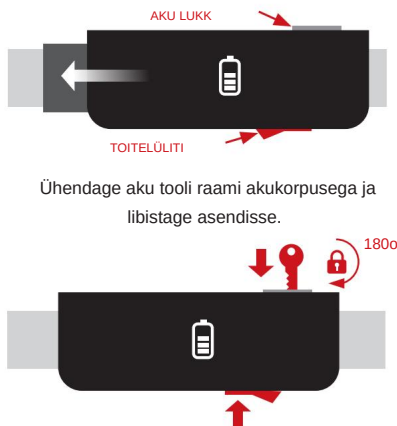


Ühendage aku tooli raami akukorpusega ja libistage asendisse.

Sisestage kaasasolev võti ja keerake seda 180°, et aku oma kohale lukustada.

Akutoite aktiveerimiseks vajutage aku all olevat lülitit.

Trepi tüüp

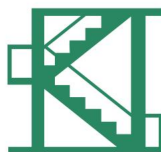

Olulised mõõtmised



1100 mm min (43")



28° - 45°

Treppidel reisimine



Kaaluvõime



254 kg

Nõuandev



HOIATUS

ÄRGE AVAGE MOOTORIT.

Sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

Teeninduse saamiseks võtke ühendust Escape Mobility®-ga.



HOIATUSED

- Soovitame tungivalt, et Escape-Chair® VOLT-i kasutaksid ainult sertifitseeritud ja koolitatud töötajad. Koolitamata töötajad võivad põhjustada vigastusi või kahjustusi.
- Escape-Chair® VOLT-i tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tööriista ebaõige kasutamine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi.
- Kasutage tööriista ainult kaasasolevat Escape-Chair® VOLT akut ja laadige seda ainult kaasasoleva Escape-Chair® VOLT-i jaoks heakskiidetud akulaadijaga*.
- Escape-Chair® VOLT-i tohib kasutada ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Ebaõige kasutamine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi.
- Ärge jätke reisijat järelevalveta. Reisija järelevalveta jätmine võib põhjustada vigastusi või kahju.

- Kasutage patsiendi toolile kinnitamiseks alati kaasasolevaid turvavöösid. Kinnitamata reisija võib toolilt maha kukkuda, põhjustades vigastusi või kahjustusi.
- Võimaluse korral proovige kasutada teiste töötajate abi. Hoidke alati tööriista enda käes ja juhendage kõiki abilisid.
- Hooldust võivad teostada ainult Escape-Chair® VOLT insenerid. Ebaõige hooldus võib tööriista kahjustada ja reisijatele vigastada.
- Rööbaste süsteemi määrimine võib põhjustada patsiendile ja/või operaatoritele vigastusi. Ärge kunagi määrige rööpade ega rihmasid.
- Tööriista sobimatute esemete kinnitamine võib põhjustada vigastusi. Kasutage tööriista ainult Escape-Chair® VOLT-i poolt heakskiidetud esemeid.

- Kasutage tööriista ainult Escape-Chair® VOLT osi ja Escape-Chair® VOLT poolt heakskiidetud hooldust. Valed osad võivad põhjustada vigastusi või kahjustusi.
- Escape-Chair® VOLT on loodud käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks. Tööriista muutmine võib põhjustada vigastusi ja kahjustusi.

SOOVITUS
Soovitame Escape-Chair® VOLT-iga regulaarselt treenida, ideaalis tulekahjuõppuste ajal. Plastikust/sünteesilisest materjalist trepiääraste, raskemate reisijate või järskude kaldega treppide puhul võib laskumiskiirus suurened, seega on soovitatav kasutada kahte inimest. Juhiste või koolituse saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga. Me ei vastuta treppide kahjustuste eest.

* Laadige tööriista akut ainult tootja juhiste järgi. Soovitame akut iga 2–3 kuu tagant täielikult laadida, kui seda ei kasutata.



Lisateabe saamiseks võtke ühendust: -

Escape Mobility Company OÜ

85 Great Portland Street, 1. korrus, London, W1W

7LT **T** +44 (0)1908 8229 028 / +44 (0)1908 8229

029 **E**: [info@escape-](mailto:info@escape-mobility.co.uk)

[mobility.co.uk](mailto:info@escape-mobility.co.uk) **W** www.escape-mobility.com



...sinu tee ohutusse kohta