

LG 2004

Trepironija LG 2004



Tehnoloogiline innovatsioon, lähenemine patsiendile ja tähelepanu esteetilistele detailidele on teinud LG2004 trepironija aastate jooksul nii edukaks. Täna pakub uus versioon kõiki omadusi, mis on välja töötatud kaheksa aasta jooksul.

Trepironijat on väga lihtne kasutada kitsastes oludes tänu patenteeritud manööverdussüsteemile, mis võimaldab trepironija sättida täpselt sobivasse asendisse enne trepil ronimise alustamist.

Kasutatavus tänu manööverdussüsteemile, võimaldab märkimisväärset energiasäästu ja pikemat aku kasutust. Kõik uuendused ühes tootes, et muuta ratastooliga seotud patsientide igapäevaelu lihtsamaks.

Vaadake meie kodulehel olevat toodet tutvustavat videot

www.invatooted.ee/trepironija-lg2004



Reguleeritava kõrgusega peatugi ja seljatugi

Uus reguleeritava kõrgusega ja polsterdatud peatugi tagab kasutajale maksimaalse mugavuse trepironija kasutamisel

Ruumisäästlik ratastooli kinnitus mehhanism

Uus kinnitus mehhanism on ruumisäästlik ja kohandatav vastavalt ratastooli tüübile

Turvavöö

Vöö pikkus min 84 cm, max 162 cm /

Tasakaalupunkti LED

Ruumisäästlik ratta tugi





■ Reguleeritava kõrgusega peatugi

Reguleerimise vahemik 15 cm



■ Ruumisäästlik ratastooli seljatoe kinnitus

Seljatoe torude vahemik 39 cm kuni 55 cm



■ Ruumisäästlik ratastooli ratta tugi

Ratastooli laius kuni laius 66 cm



■ Haakeseadme lukusti

Ratastooli haakimise hõlbustamiseks.

Veetiisliit tõstetakse lihtsalt seljatoega ühendamiseks.

Hoovad ülalt lukusti ja veetiisli liigutamiseks

Abistaja saab ratastooli vaevata fikseerida

360°

■ Hoovaga turva lukusti


Mehaaniline lukk, mis takistab trepironija kasutamist, kui see pole korralikult pesas ja lukustunud



Cod. A009

■ Kallutusvastane ratas kaldteega
trepironijale

Kallutusvastast ratast soovitatakse kasutada koos kaldteedega mudeliga LG2004 / 150 / A008

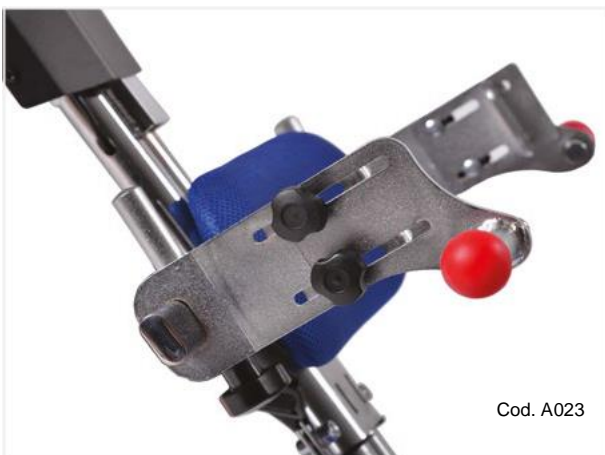

Cod. A023

■ Reguleeritava sügavusega ratastooli
haakesead

Reguleerimise vahemik min 16 cm, max 24 cm



Cod. A010

■ Ratta tugede pikendused mittestandardse
suurusega ratastoolidele

Ratastoolile laiusega kuni 100 cm

■ Aku järsul tühjenemisel tekkinud hädaolukord

4 tõsteratta ja lintide käsitsi liigutamine hädaolukorras





- Väikeseid kaldteed ratastoolidele tagaratastega Ø 300 (12 ")




Cod. A006

PÖÖRLEB KIIRESTI JA PIIRAMATULT



LG2004 trepironija pakub ületamatult lihtsat kasutamist tänu 4 manööverrata patenteeritud elektrilisele tõstmisele, mis võimaldab treppidel ronijal vaevata keerutada ja kitsastes kohtades pöörata.

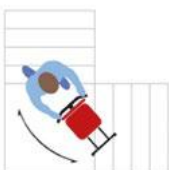

TREPIDE TÜÜBID

Ainult sirgel trepil

LG2004 trepironija ja kogu rööbasteega treppide ronija sobib ainult sirgete treppide jaoks

Trepironija LG 2004 – Tehnilised andmed

Kogu kaal	Kg 58
Mootoriga osa kaal	Kg 46
Juhthoova kaal	Kg 12
Maksimum mõõtmed	144x67x99 Cm
Mootori võimsus	300 W
Akulaadija võimsus	80 W
Akulaadija toite pinge	100-240 V
Transporditava kaal	Kg 130 - (mitte rohkem 150 Kg)
Täielikult laetud akuga läbitav vahemaa	540 astet (patsient kaaluga 85 Kg)
Reserv aku olekus	80 astet
Minimaalne trepi laius	77 Cm
Minimaalne manööverdamise ruum L- kujulisel trepil	98x98 Cm
Minimaalne manööverdamise ruum U – kujulisel trepil	98x170 Cm
Maksimaalne kalle	70% - 35°
Töö temperatuur	0° - 40°
Hoiustamise temperatuur (koos pakendiga)	-10° ÷ 50°
Maximum kiirus	15 astet minutis
Pakendi mõõdud	116x60x43h cm